



步驟4：

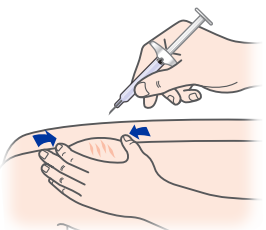


在清潔過的注射部位周圍輕提起皮膚的褶皺，與皮膚成45度角將針筒緩注射劑；快速將針頭完全插入皮膚。當針完全插入皮膚後，可以鬆開緊捏住的皮膚。

步驟5：

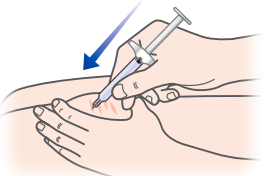

緩慢向下推動推桿以注射所有 宜安適 溶液。

步驟6：

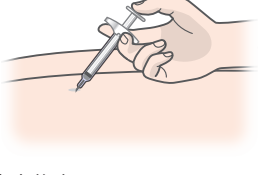

當針筒排空後，沿著插入的角度從皮膚上將針頭拉出。

- 切勿重新蓋上針頭蓋，此動作可能會被針刺到受傷。

廢棄物處理：



將整個注射器置於被認可的尖銳廢棄物收集容器中。有關尖銳廢棄物收集容器裝滿時之正確處理方式，請洽您的就醫院所。尖銳廢棄物收集容器應可在當地藥局購買。

- 請勿將止廢物收集容器丟至家用垃圾桶。
- 不可以回收。
- 請勿重複使用宜安適預充填充注射劑。
- 將收集容器放在兒童看不見也無法觸及的地方。

C. 注射部位之照護

若在注射部位有一點出血，可以用紗布墊覆蓋注射部位。

- 不要揉注射部位。

如果有需要可以用絆創貼覆蓋注射部位。

7.2. 使用說明

在開始使用 宜安適 之前以及每次重新獲得處方時，請閱讀使用說明，其中可能內含新的信息。

- 請勿試圖自行注射，除非您的醫生或護士已教導您如何進行注射。

內含 50 毫克 宜安適 之一次性使用的預充注射器

請將一端正確拆封，乾淨的平面，並取得所有您需要使用的器材：

- 一支新的 宜安適 預充注射器



- 請勿搖晃預充注射器

未內含包裝之器材：

- 一塊酒精棉片、紗布墊與絆創貼

尖銳廢棄物收集容器



A. 注射前的準備

1. 檢查預充注射器

檢查預充注射器標籤上的有效期限

- 請勿使用過期之針筒裝注射劑
- 若預充注射器缺少明顯的表面，請勿再使用。該預充注射器內部之組件可能已經損壞。
- 若針頭遺失或沒有牢固地蓋好，請勿使用該預充注射器

2. 檢查注射溶液

透過注射器的透明視窗，檢查預充注射器內的藥劑。藥劑應為澄清至略呈乳白色、無色或淡黃色，可能含有小型白色或幾近透明的蛋白質微粒。

- 若溶液變色、混濁，或除了上述微粒之外，還有其他顆粒，請勿使用。


3. 藥物儲存與室溫：

從冰櫃中取出一支預充注射器，在注射前放置於室溫至少30分鐘。

此步驟很重要，可使藥物比較容易且舒適於注射。

- 在尚未準備好要注射前，請勿取下針頭蓋。
- 切勿以任何其它方式加熱 宜安適 (如用微波或放入熱水中)。

4. 選定注射部位：

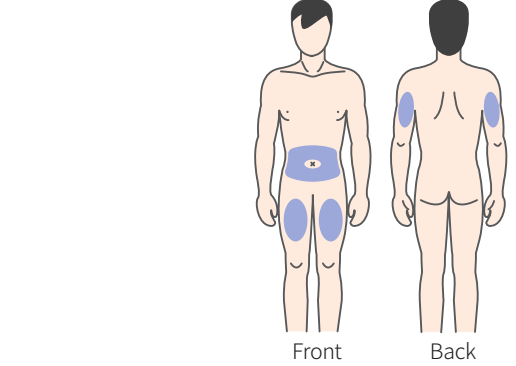

宜安適 預充注射器以皮下注射，建議的注射部位為大腿、腹部或上臂的背部（請參見左圖）。

每次注射輪替不同的位置。

若要注射到腹部，請選擇距離肚臍至少 5 公分以上的部位。

- 請勿注射在皮膚發紅、發硬、瘀青或磨損的區域。
- 請避免注射在有疤痕或妊娠紋的區域。
- 如果您患有乾癬，請不要注射在任何凸起、變厚、發紅或有鱗屑的皮膚或傷口上。


B. 注射的步驟

步驟1：

用肥皂及清水洗手。




步驟2：

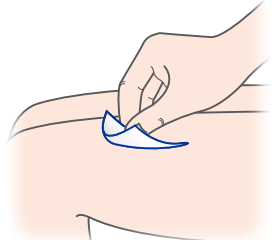

用酒精棉片拭注射部位的皮膚。請參見“選定注射部位”選擇注射部位。

- 在注射之前，請不要再碰觸這個區域。


步驟3：

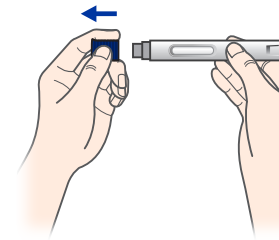

垂直地拉開針頭蓋，將其丟入垃圾桶或尖銳物貯存容器中。

- 取下針頭蓋時，請勿扭曲或彎曲針頭蓋，以避免傷害到針頭。切勿重新蓋上針頭蓋。
- 切勿重新戴上針頭蓋。


步驟4：

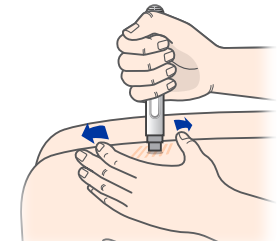

在周圍輕輕擠擦清潔過注射部位的皮膚，與皮膚約略成90度角預充注射劑。

- 請不要把皮膚捏起來。
- 需撐開皮膚，以形成堅固的表面。


步驟5：

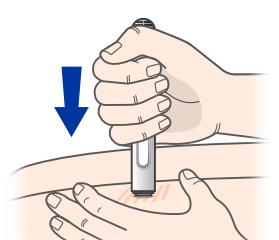

將預充注射器向下用力壓在注射部位以開始注射。當注射開始時，注射設備將被啟動，您會聽到一個喀喀聲。

- 請繼續攪住注射器緊壓在注射部位上。
- 注射設備會再次被啟動，您會再聽到一個喀喀聲。


步驟6：

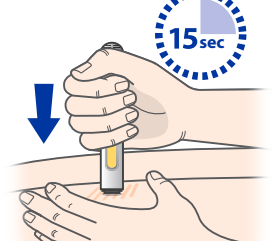

在注射設備第二次被啟動並再次聽到喀喀聲後，緩慢計數至 15 (秒)，以確保注射得以完成。

- 在注射尚未完成之前，切勿放開在注射部位的擠壓。
- 注射期間請勿移動預充注射器。

步驟7：

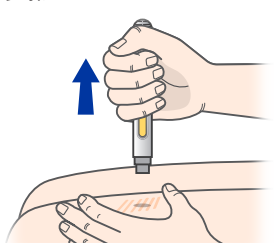

從皮膚上取下空的注射器。

請針筒會完全覆蓋住針頭。

檢查注射器窗口中的黃色針筒推桿，以確認藥物劑量已全部注入體內。

廢棄物處理：



將空的注射器置於公告適用的尖銳廢棄物收集容器中。

有關尖銳廢棄物收集容器裝滿時之正確處理方式，請洽您的就醫院所。尖銳廢棄物收集容器應可在當地藥局購買。

- 請勿將尖銳廢棄物收集容器丟至家用垃圾桶。
- 不可以回收。
- 將收集容器放在兒童看不見也無法觸及的地方。

C. 注射部位之照護

若在注射部位有一點出血，可以用紗布墊覆蓋注射部位。

- 不要揉注射部位。

如果有需要可以用絆創貼覆蓋注射部位。

版本：SPC YYYYYMMDD-X

製造廠及地址：

Catalent Belgium SA
Font Saint Landry 10,
Brussels, 1120,
Belgium

或
Patheon Italia S.p.A.
Via G. B. Saurin, 110,
Monza, 20900,
Italy

包裝廠：

Farmaceutici Formenti S.p.A.
Via Di Vittorio,
2 - 21040 Origgio (VA),
Italy

或

Enesta Belgium NV
Klokkendriest 1,
Hamont-Achel, 3930,
Belgium

藥商名稱：

台灣三景國際醫藥有限公司
台北市信義區忠孝東路4段50號13樓 (1305室)